

URZĄDZENIA KOSMETOLOGICZNE · ESTE:MED

Katalog urządzeń este:med

Profesjonalne technologie dla gabinetu kosmetycznego i medycyny estetycznej - lasery frakcyjne, światło szerokopasmowe, epilacja, radiofrekwencja, mezoterapia oraz diagnostyka skóry.

THULON

ERGLASE + THULON

OPTINA

LUMIERE

ESTEGUN 2.0

EYELIFT RF

D-FRAX 3.0

SMART SKIN 3.0

HYDROPEEL H2



Spis urządzeń

Dziewięć technologii rozszerzających ofertę gabinetu - od terapii laserowych po inteligentną diagnostykę skóry.

este:med

01	THULON Laser tulowy 1927 nm	str. 01
02	ERGLASE+ THULON Dual Fractional Laser 1550 + 1927 nm	str. 02
03	OPTINA Platforma światła szerokopasmowego DPL + CCL	str. 03
04	LUMIERE Laser do epilacji 755 · 808 · 940 · 1064 nm	str. 04
05	ESTEGUN 2.0 Pistolet do mezoterapii wieloigłowej	str. 05
06	EYELIFT RF Radiofrekwencja dedykowana okolicy oka	str. 06
07	D-FRAX 3.0 RF mikroigłowy z funkcją Vacuum	str. 07
08	SMART SKIN 3.0 Inteligentny analizator skóry – AI + 3D	str. 08
09	HYDROPEEL H2 Oczyszczanie wodorowe + hydradermabrazja	str. 09

W pakiecie każdego urządzenia: ESTETRAINING · ESTECARE · ESTEMARKETING · FINANSOWANIE (LEASING, KREDYT, RATY)

Technologia pierwszego wyboru w terapiach melasmy, przebarwień i fotoodmładzania.



THULON to laser tulowy 1927 nm w technologii światłowodowej (Fiber Laser) – długości fali uznawanej za standard w terapiach melasmy i przebarwień. Dzięki wysokiemu powinowactwu do wody energia działa precyzyjnie w obrębie naskórka i powierzchniowych warstw skóry właściwej, wspierając redukcję przebarwień, poprawę tekstury oraz regenerację skóry.

Technologia 1927 nm jest szczególnie ceniona w terapiach zmian pigmentacyjnych, fotostarzenia oraz procedurach poprawiających jakość skóry – przy krótkim okresie rekonwalescencji i wysokim komforcie pacjenta.

1927 nm

DŁUGOŚĆ FALI

Jedna z najbardziej cenionych w terapiach przebarwień i melasmy

3 tryby

PRACA

Nieablacyjny, subablacyjny, ablacyjny

2 głowice

ZABIEGOWE

Statyczna i dynamiczna

KRÓTKA

REKONWALESCENCJA

Wysoki komfort terapii i szybki powrót do codziennych aktywności.

WSKAZANIA


- melasma
- przebarwienia postłoneczne i pozapalne (PIH)
- fotostarzenie skóry
- blizny potrądzikowe
- nierówna tekstura skóry
- drobne zmarszczki
- blizny potrądzikowe

MOŻLIWOŚCI ZABIEGOWE

- terapia melasmy i przebarwień
- fotoodmładzanie
- resurfacing frakcyjny
- poprawa jakości i tekstury skóry
- terapia blizn potrądzikowych
- Laser Assisted Drug Delivery (LADD)

SPECYFIKACJA

TYP WIĄZKI	światłowod tulowy (Fiber Laser)	TRYBY PRACY	nieablacyjny, subablacyjny, ablacyjny
DŁUGOŚĆ FALI	1927 nm	TRYBY SKANOWANIA	sekwencyjny, centralny, losowy
MOC	15 W	GŁOWICE ZABIEGOWE	statyczna i dynamiczna
ENERGIA	do 50 mJ		

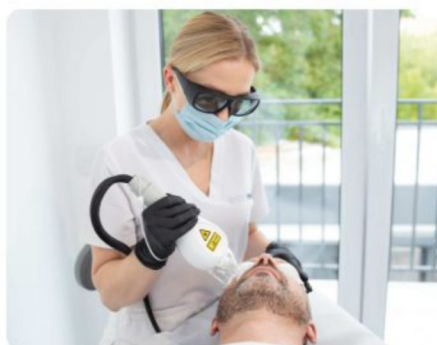

Kompleksowa przebudowa skóry - od naskórka po skórę właściwą.



ERGLASE + THULON to laser frakcyjny DUAL łączący dwie komplementarne długości fali: 1550 nm oraz 1927 nm. Dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu na różne warstwy skóry umożliwia skuteczną terapię przebarwień, blizn, rozstępów, zmarszczek oraz utraty jędrności.

Laser erbowo-szkłany 1550 nm stymuluje przebudowę skóry właściwej i wspiera procesy remodelingowe, natomiast laser tulowy 1927 nm odpowiada za poprawę kolorytu, jakości i tekstury skóry. Połączenie obu technologii pozwala osiągać wielopoziomowe efekty terapeutyczne przy wysokim komforcie zabiegowym.

1550 NM + 1927 NM

DŁUGOŚĆ FALI

Dwie długości fali w jednym urządzeniu

DUAL

TECHNOLOGY

Przebudowa skóry właściwej i poprawa jakości naskórka

DO 300 mJ

ENERGIA IMPULSU

Wysoka energia impulsu do intensywnej przebudowy skóry

KRÓTKA

REKONWALESCENCJA

Skuteczne terapie przy wysokim komforcie pacjenta

WSKAZANIA

- fotostarzenie skóry
- utrata jędrności i elastyczności
- blizny potrądzikowe
- rozstępy
- melasma
- przebarwienia posłoneczne i pozapalne
- rozszerzone pory i nierówna tekstura skóry
- drobne i średnie zmarszczki

MOŻLIWOŚCI ZABIEGOWE

- kompleksowe fotoodmładzanie
- resurfacing frakcyjny
- terapia przebarwień i melasmy
- terapia blizn potrądzikowych
- terapia rozstępów
- procedury anti-aging
- Laser Assisted Drug Delivery (LADD)

SPECYFIKACJA

TYP LASERA	erbowo-szkłany + tulowy	OBSZAR SKANOWANIA	do 20 × 20 mm
DŁUGOŚĆ FALI	1550 nm + 1927 nm	TRYBY PRACY	nieablacyjny, subablacyjny, ablacyjny
MOC / ENERGIA IMPULSU	Do 15 W / do 300 mJ	TRYBY SKANOWANIA	sekwencyjny, centralny, losowy
TYP WIĄZKI	światłowod (Fiber Laser)	CHŁODZENIE	powietrzne



Naczynia, przebarwienia, trądzik i fotostarzenie – cztery filary oferty w jednej platformie.



OPTINA łączy światło szerokopasmowe DPL z opcjonalną technologią CCL, obejmując jedną platformą najczęściej poszukiwane terapie gabinetowe. Umożliwia skuteczną pracę z rumieniem, zmianami naczyniowymi, trądzikiem, przebarwieniami oraz oznakami fotostarzenia – i rozszerzenie oferty gabinetu o zabiegi cieszące się wysokim zainteresowaniem pacjentów.

Dzięki precyzyjnie dobranym filtrom zabiegowym oraz technologii światła szerokopasmowego urządzenie pozwala prowadzić wszechstronne terapie poprawiające koloryt, jakość i wygląd skóry przy wysokim komforcie zabiegowym.

DPL + CCL

TECHNOLOGIA

Zaawansowana platforma światła szerokopasmowego

TERAPIE DPL

ZAKRES

Terapie naczyniowe, pigmentacyjne i przeciwtrądzikowe.

FOTOODMŁADZANIE

EFEKT

Poprawa kolorytu, jakości i wyglądu skóry.

7 FILTRÓW

ZABIEGOWYCH

Precyzyjne dopasowanie terapii do wskazań

WSKAZANIA

- rumień, teleangiektazje i zmiany naczyniowe
- trądzik pospolity i skóra łojotokowa
- przebarwienia posłoneczne i pozapalne (PIH)
- nierównomierny koloryt skóry
- fotostarzenie i drobne zmarszczki
- niepożądane owłosienie

NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE TERAPIE

- terapia zmian naczyniowych i rumienia
- terapia trądziku
- redukcja przebarwień
- fotoodmładzanie
- epilacja DPL
- zabiegi rewitalizujące
- procedury regeneracyjne CCL

SPECYFIKACJA

TECHNOLOGIA	DPL + CCL	TRYB SHR	do 20 J/cm ²
ZAKRES SPEKTRALNY DPL	400–950 nm	Częstotliwość	do 10 Hz
FILTRY DPL	400 nm 515 nm 530 nm 640 nm	Czas impulsu	do 200 ms
FILTRY CCL	CL-A SR-A PR-A	SYSTEM CHŁODZENIA	kontaktowy + obieg wodny
ENERGIA	1–50 J/cm ²	STEROWANIE	ekran dotykowy



Trwała redukcja owłosienia. Wszystkie fototypy I–VI, twarz i ciało.



LUMIERE to system laserowy wykorzystujący cztery długości fal, które działają synergistycznie w obrębie mieszków włosowych. Połączenie fal 755 nm, 808 nm, 940 nm i 1064 nm umożliwia skuteczną epilację różnych rodzajów włosów oraz pracę na wszystkich fototypach skóry, także ciemnych.

Każda długość fali oddziałuje na inne struktury mieszków włosowych, zwiększając skuteczność terapii niezależnie od rodzaju owłosienia. Wielostopniowy system chłodzenia poprawia komfort pacjenta oraz ułatwia pracę specjalisty.

4 FALE

DŁUGOŚCI

Kompleksowe działanie na cały mieszek włosowy

I–VI

FOTOTYPY

Skuteczna praca również na ciemnych fototypach skóry

2500 W

MOC

Szybkie zabiegi nawet na dużych obszarach ciała

SYSTEM

CHŁODZENIA

Komfort pacjenta i wysoki komfort pracy

WSKAZANIA

- trwała redukcja owłosienia
- włosy cienkie i średniej grubości
- włosy grube i głęboko osadzone
- włosy odporne na wcześniejsze terapie
- wszystkie fototypy skóry I–VI
- obszary twarzy i ciała

NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE TERAPIE

- epilacja twarzy, wąsika i brody
- epilacja pach
- epilacja bikini
- epilacja nóg
- epilacja pleców
- epilacja klatki piersiowej

SPECYFIKACJA

TECHNOLOGIA	laser wielowięzkowy – 4 długości fal	SZEROKOŚĆ IMPULSU	10–400 ms
DŁUGOŚĆ FALI	755 nm 808 nm 940 nm 1064 nm	Żywotność generatora	do 50 mln impulsów
MOC / ENERGIA	2500 W / do 90 J/cm ²	System chłodzenia	powietrze + woda + TEC + szafir
ROZMIAR PLAMKI	12 × 20 mm	STEROWANIE	ekran dotykowy 13,3" + panel w rękojeści



Mezoterapia wieloigłowa z powtarzalnością, której nie zapewni technika manualna.



EsteGun 2.0 automatyzuje mezoterapię wieloigłową dzięki technologii vacuum, systemowi 9 igieł oraz automatycznemu dozowaniu preparatu. Urządzenie zapewnia równomierną aplikację substancji aktywnych, kontrolę parametrów i stałe warunki pracy na całym obszarze zabiegowym.

Dzięki automatyzacji iniekcji zabiegi są szybsze, bardziej komfortowe i przewidywalne dla specjalisty oraz pacjenta. System Anti-Backflow ogranicza straty preparatu i zwiększa bezpieczeństwo terapii.

9 igieł

SYSTEM WIELOIGŁOWY

Szybsze opracowanie większych obszarów zabiegowych

VACUUM

TECHNOLOGIA

Stabilizacja skóry, większy komfort i mniejsze ryzyko zasinień

AUTO

PODAWANIE PREPARATU

Stala ilość preparatu przy każdym wkluciu

KRÓTKA

REKONWALESCENCJA

Większa przewidywalność efektów niż w technice manualnej

WSKAZANIA

- zmarszczki i utrata jędrności skóry
- fotostarzenie i wiotkość skóry
- skóra odwodniona i pozbawiona blasku
- przebarwienia i rozszerzone pory
- blizny potrądzikowe
- okolica oczu
- terapia skóry głowy
- profilaktyka przeciwstarzeniowa

NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE TERAPIE

- mezoterapia wieloigłowa twarzy, szyi i dekoltu
- mezoterapia wieloigłowa dłoni
- mezoterapia wieloigłowa skóry głowy
- terapie anti-aging i biostymulujące
- zabiegi rewitalizujące i nawilżające
- terapia blizn potrądzikowych

SPECYFIKACJA

TRYBY PRACY	Auto / Manual / Hybrydowy	FUNKCJA VACUUM	5 poziomów regulacji
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI WKŁUCIA	0,5–3,0 mm	SYSTEMY AUTOMATYZACJI	Anti-Backflow, auto dozowanie, licznik nakłuć
DAWKI INIEKCJI	0,009–0,2 ml	KOMPATYBILNOŚĆ	strzykawki 3 ml, 5 ml oraz ampułkostrzykawki
SYSTEM WIELOIGŁOWY	9 igieł		



Radiofrekwencja stworzona dla okolicy oka - bez igieł, bez rekonwalescencji.



Eyelift RF to urządzenie wykorzystujące monopolarną radiofrekwencję 2,0 MHz oraz technologię wibracji mechanicznej, stworzone do zabiegów w wymagającej okolicy oka. Terapia wspiera poprawę napięcia skóry, mikrokrążenia oraz drenażu limfatycznego, pomagając redukować widoczność drobnych zmarszczek, obrzęków i oznak zmęczenia.

Dzięki nieinwazyjnemu charakterowi procedura nie wymaga rekonwalescencji i może być wykonywana przez cały rok - jako samodzielna terapia lub uzupełnienie zabiegów anti-aging i rewitalizujących.

2,0 MHz

MONOPOLARNA RF

Kontrolowane dogrzewanie tkanek bez naruszania ciągłości naskórka

RF + WIBRACJA

TECHNOLOGIA

Wsparcie mikrokrążenia oraz drenażu limfatycznego

OKOLICA OKA

TECHNOLOGIA

Parametry dostosowane do cienkiej i wymagającej skóry

KOMFORT

BEZ REKONWALESCENCJI

Komfortowa terapia przez cały rok

WSKAZANIA

- utrata napięcia skóry okolicy oka
- drobne zmarszczki mimiczne
- obrzęki i oznaki zmęczenia
- wiotkość skóry dolnej powieki
- skóra cienka i odwodniona
- profilaktyka anti-aging

NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE TERAPIE

- Eye Lift – poprawa napięcia i jędrności skóry
- Anti-Fatigue – redukcja obrzęków i oznak zmęczenia
- Regeneration – rewitalizacja skóry cienkiej i odwodnionej
- Firming – ujędrnienie i profilaktyka anti-aging

SPECYFIKACJA

TECHNOLOGIA	RF monopolarna + wibracja	UKŁAD ELEKTROD	elektroda czynna + elektroda bierna
CZĘSTOTLIWOŚĆ RF	2,0 MHz	GŁOWICA	nieinwazyjny, bez rekonwalescencji
ZAKRES RF	4 poziomy intensywności	TRYB ZABIEGU	nieinwazyjny, bez rekonwalescencji
WIBRACJA	4 poziomy intensywności	CZAS ZABIEGU	ok. 30 minut



Intensywna przebudowa, zagęszczenie i ujędrnienie skóry w jednej terapii.



D-FRAX 3.0 łączy w jednej głowicy frakcyjne mikronakłucia, bipolarne fale radiowe RF oraz technologię Vacuum. Synergia trzech technologii umożliwia terapie ukierunkowane na poprawę jakości skóry, redukcję zmarszczek, blizn i rozstępów oraz intensywną stymulację procesów regeneracyjnych.

Dzięki szerokim możliwościom personalizacji parametrów zabiegowych urządzenie sprawdza się zarówno w terapiach twarzy, jak i ciała - od precyzyjnych zabiegów w wymagających okolicach po intensywną przebudowę większych obszarów.

3 w 1

SYNERGIA TECHNOLOGII

Mikronakłucia, RF i Vacuum wzmacniające efekty przebudowy skóry

BIPOLARNA RF

ENERGIA

Intensywna stymulacja kolagenu i elastyny oraz zagęszczenie skóry

VACUUM

TECHNOLOGIA

Większy komfort pacjenta i precyzyjne prowadzenie głowicy

TWARZ I CIAŁO

ZAKRES

Szeroki zakres terapii na różnych obszarach zabiegowych

WSKAZANIA

- utrata jędrności i elastyczności skóry
- zmarszczki i oznaki starzenia
- blizny potrądzikowe
- rozszerzone pory i nierówna struktura skóry
- przebarwienia
- rozstępy
- wiotkość skóry twarzy i ciała

ZABIEGI, KTÓRE DODASZ DO CENNIKA

- RF mikroigłowy anti-aging
- przebudowa i zagęszczenie skóry
- terapia blizn potrądzikowych
- terapia porów i tekstury skóry
- redukcja rozstępów
- zabiegi ujędrniające twarz i ciało
- procedury regeneracyjne RF

SPECYFIKACJA

TECHNOLOGIA	RF mikroigłowy + Vacuum	PODCIŚNIENIE	regulowane, z możliwością wyłączenia
GŁĘBOKOŚĆ NAKŁUWANIA	0,2–3,5 mm	KARTRIDŻE	10, 25, 64 igły (izolowane) oraz Crystal
MOC RF	0–200 W	POLE ZABIEGOWE	1 × 10 mm 5 × 5 mm 8 × 8 mm
CZAS EMISJI RF	0,1–0,5 s	TRYBY PRACY	twarz i ciało



SMART SKIN ANALYSIS SYSTEM 3.0

Inteligentny analizator skóry – AI + 3D

este:med

08

Diagnostyka, która zamienia konsultację
w plan zabiegowy.



Smart Skin Analysis System 3.0 to analizator skóry, który łączy spektroskopię, cyfrowe przetwarzanie obrazu i sztuczną inteligencję. Zapewnia kompleksową ocenę kondycji skóry oraz analizę zmian widocznych i ukrytych pod jej powierzchnią.

System umożliwia generowanie profesjonalnych raportów PDF i porównywanie efektów terapii w czasie. Dzięki obrazowaniu 35 MP oraz wizualizacji 3D wspiera konsultacje kosmetyczne, personalizację terapii i sprzedaż planów zabiegowych.

4 TRYBY

OBRAZOWANIA SKÓRY

Analiza problemów skórnych przy różnych źródłach światła

AI

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Automatyczna ocena parametrów skóry i wizualna symulacja zmian

3D

WIZUALIZACJA

Prezentacja problemów skórnych na trójwymiarowym modelu twarzy

RAPORTY PDF

MONITORING

Monitorowanie efektów zabiegowych i budowanie zaufania klienta

ANALIZOWANE PARAMETRY

- zmarszczki
- rozszerzone pory
- pigmentacja powierzchniowa i głęboka
- przebarwienia UV
- wrażliwość skóry
- trądzik i zaskórniki
- szorstkość skóry i koloryt
- poziom melaniny

FUNKCJE SYSTEMU

- analiza skóry w 4 trybach oświetlenia
- wizualizacja 3D skóry
- wizualna symulacja zmian AI
- raporty PDF dla klienta
- analiza porównawcza efektów terapii
- archiwizacja historii i baza klientów
- rekomendacja terapii i produktów

SPECYFIKACJA

APARAT	35 MP	SYSTEM	Android, procesor RK3588
OBRAZOWANIE	analiza spektralna + obraz cyfrowy	PAMIĘĆ	8 GB RAM / 64 GB
TRYBY ANALIZY	dzienne, krzyżowe, równoległe, UV	ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU	1920 × 1080
FUNKCJE	3D + AI + PDF + porównanie	ŁĄCZNOŚĆ	Wi-Fi



Dogłębne oczyszczanie skóry połączone z działaniem antyoksydacyjnym aktywnego wodoru.



Oczyszczanie wodorowe HydroPeel H2 to terapia łącząca dogłębne oczyszczanie skóry z działaniem antyoksydacyjnym. Dzięki generatorowi wodoru aktywny wodór wiąże wolne rodniki odpowiedzialne za przyspieszone starzenie skóry, wspierając jej regenerację.

O jakości zabiegu decyduje generator z platynowanymi elektrodami, wytwarzający w elektrolizie wodę alkaliczną bogatą w aktywny wodór. Modułowa platforma rozwija się razem z ofertą gabinetu - nawet do 14 funkcji zabiegowych.

H₂

GENERATOR WODORU

Woda alkaliczna bogata w aktywny wodór wytwarzana podczas zabiegu

14 FUNKCJI

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY

Modułowa platforma rośnie razem z ofertą Twojego gabinetu

PLATYNA

ELEKTRODY GENERATORA

Stabilna elektroliza i powtarzalna produkcja wodoru

CAŁY ROK

BEZ SEZONOWOŚCI

Bezpieczne zabiegi przez cały rok, także w abonamencie

EFEKTY ZABIEGOWE

- świeża, promienna i dotleniona skóra
- głębokie oczyszczenie porów i cery tłustej
- złuszczenie martwych komórek bez podrażnień
- nawilżenie i wygładzenie zmarszczek
- poprawa napięcia i jakości skóry
- komfort także dla cery wrażliwej
- spowolnienie procesów starzenia skóry
- efekt widoczny od pierwszego zabiegu

ZABIEGI W OFERCIE

- głębokie oczyszczanie skóry
- terapia skóry wrażliwej i tłustej
- nawilżenie i regeneracja
- ujędrnienie skóry
- infuzja składników aktywnych
- zabiegi bankietowe „Glow”
- przygotowanie do zabiegów

SPECYFIKACJA

POTENCJAŁ ORP	ujemny (redukcyjny)	PRZEWODNOŚĆ ROBOCZA	350 - 900 µS/cm
AKTYWNY WODÓR (H ₂)	z elektrolizy wody	MOC GENERATORA	150 W
PH	woda alkaliczna	MOC SSANIA	do 800 mmHg
ELEKTRODY	platynowane	GŁOWICE H ₂ PEEL / H ₂ JET	30 W / 550 W



ESTE:MED łączy zaawansowane technologie z praktycznym zastosowaniem w gabinecie.

1

ESTE TRAINING

Certyfikowane szkolenia oraz gotowe protokoły zabiegowe – zespół gabinetu pracuje pewnie od pierwszego dnia.

2

ESTE CARE

Wsparcie techniczne, serwis oraz opieka posprzedażowa przez cały okres użytkowania urządzenia.

3

ESTE MARKETING

Materiały wspierające wdrożenie i promocję nowych usług – od komunikacji zabiegów po rozwój oferty gabinetu.

4

FINANSOWANIE

Leasing, kredyt oraz raty dopasowane do potrzeb i możliwości gabinetu.

este:med

Umów prezentację urządzenia

Skontaktuj się z zespołem Este Group i sprawdź, jak wybrana technologia może wspierać rozwój oferty Twojego gabinetu.

+48 796 176 770

kontakt@estegroup.pl

este-med.pl

estegroup.pl

estesklep.pl

PEŁNA OFERTA URZĄDZEŃ ESTE:MED

01 THULON / **02** ERGLASE+ THULON / **03** OPTINA / **04** LUMIERE / **05** ESTEGUN 2.0
/ **06** EYELIFT RF / **07** D-FRAX 3.0 / **08** SMART SKIN ANALYSIS SYSTEM 3.0 /
09 HYDROPEEL H2

este:med